


GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

EQUIPO: BÁSCULA ANÁLOGA / BÁSCULA DIGITAL

ACCESORIOS: ADAPTADOR, CABLE AC, BATERÍA

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Coloque la báscula sobre un piso plano y duro para mejor exactitud. La exactitud puede verse afectada en pisos suaves o alfombrados.
2. Suba y baje de la báscula varias veces antes de proceder al pesaje en sí. Esto alineará el mecanismo interno.
3. Ajuste la maca a cero o presione el botón zero si fuese necesario, utilizando el botón de ajuste en el pie de la báscula.

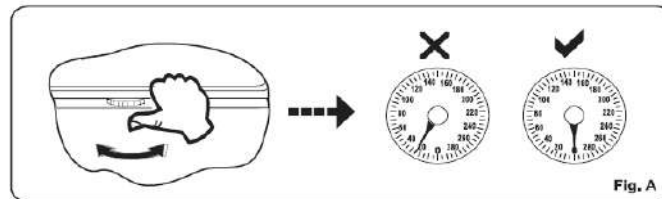

Nota: A medida que use la báscula puede notar que el marcador se desvía ligeramente del cero. El mejor momento para ajustar la báscula es inmediatamente después de un pesaje, si el marcador no regresa exactamente a cero ajústelo con el botón.

4. Suba a la báscula con el peso equitativamente repartido en ambos pies, manténgase quieto.

CLAVES DE PESAJE

- Para resultados más reales pésele sin zapatos. El peso promedio del zapato es de 2 a 5 lb (0.9 a 2.3 kg) en las mujeres y de 5 a 8 lb (2.3 a 3.6 kg) en los hombres.
5. Informar al encargado del área de mantenimiento en caso de detectar fallas en su funcionamiento y anomalías en el estado físico del equipo, este debe solicitar el mantenimiento correctivo inmediato en la administración correspondiente diligenciando el Formato **Solicitud de Mantenimiento Correctivo** y enviándolo al correo de "mantenimiento@tecnologiavitalmedica.com" o a través de la página web "www.tecnologiavitalmedica.com"
 6. No mover el equipo del lugar asignado para su operación y manejo, cualquier cambio debe ser notificado al encargado del área de mantenimiento.
 7. Los eventos adversos que se presenten durante la manipulación del equipo deben ser notificados inmediatamente a la Administración o al representante del comité de **Seguridad del Paciente**.
 8. No consumir alimentos sobre el equipo.

ACTIVIDADES DE CONTROL Y LIMPIEZA

1. Verificar condiciones ambientales.
2. Efectuar limpieza integral externa con un paño de micro fibra humedecido con alcohol antiséptico al 96%, NO UTILICE ABRASIVOS FUERTES O QUÍMICOS.
3. Los cojinetes y partes móviles están permanentemente lubricados. NO UTILICE ACEITES O LUBRICANTES.

GUÍA PARA EL MANEJO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

CAZAFALLAS		
SITUACIÓN	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Al momento de pesar toma mediciones erróneas 	<ul style="list-style-type: none"> Superficie inestable Báscula desajustada 	<ul style="list-style-type: none"> Ubicar la báscula en una superficie plana Ajustar la maca a cero o presionar el botón zero Requerir calibración después del ajuste a cero (comuníquese con servicio técnico)
<ul style="list-style-type: none"> Báscula con el indicador (aguja) inestable 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo inoperante 	<ul style="list-style-type: none"> Comuníquese con servicio técnico
<ul style="list-style-type: none"> Báscula digital no enciende 	<ul style="list-style-type: none"> Equipo no conectado a la red eléctrica Equipo sin batería 	<ul style="list-style-type: none"> Cerciorarse que la conexión del cable esté conectado al toma eléctrico Cerciorarse que las baterías tengan carga Comuníquese con servicio técnico

Elaboró: Jefferson Álvarez

Cargo: Ingeniero de Mantenimiento **TVM S.A.S**